

PIATTAFORMA CM-COVID 19

Gestione monitoraggio con APP

GESTIONE MONITORAGGIO PAZIENTI CON APP



Di seguito vengono forniti i passaggi per l'attivazione di un paziente in monitoraggio con APP:

Prima dell'arruolamento

- Verificare che il paziente abbia un dispositivo (smartphone) con sistema operativo Android per poter selezionare il piano corretto

Arruolamento

- Effettuare l'arruolamento selezionando tra i tre piani (asintomatico con APP, paucisintomatico con APP, sintomatico con APP)

Dopo l'arruolamento

- Far scaricare da Play Store l'applicazione Evo Droid => effettuare la ricerca nello store digitando «phebo» o «evodroid» (esce come primo risultato)
- Una volta scaricata la app effettuare la procedura di prima accensione come spiegato di seguito

PROCEDURA PRIMA ACCENSIONE

ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE SMARTPHONE



Una volta inserito il Piano di Monitoraggio e selezionata la freccia all'interno del riquadro «Monitoraggio APP» il sistema propone la lista dei pazienti arruolati. Per completare l'attività di configurazione è necessario procedere con le seguenti azioni:

"Lista pazienti in monitor" > "Gestione Paziente" > "Configurazione"

The screenshot displays the Gpi Monitor System interface. At the top, a navigation bar includes 'Privacy & Security', 'Anagrafiche', 'Monitor System', 'Lingue', and 'Info'. Below this, a 'Filtro Ricerca Rapida' section allows filtering by 'Cognome', 'Nome', 'Cod.Fis.', 'Gruppo', 'Monitorato', and 'Record'. A red arrow labeled '1' points to the 'Gestione Paziente' button in the 'Azioni Rapide' sidebar. The main area shows a list of patients with columns for 'Allarme', 'Cognome', 'Nome', 'Cod.Fis.', 'Gruppo', 'Monitorato', 'Ultima Comunicazione', and 'Note'. The patient 'GIORGIO OPPO' is highlighted. Below the list, a detailed view for 'GIORGIO OPPO' is shown, including 'Ultima Comunicazione : 22/03/2021 15:34' and 'Giorni Monitoraggio : 2'. The 'Anagrafica' section shows 'OPPO GIORGIO Sesso : M' and 'Cod.Fis. : PPOGRG38T16B354M'. The 'Rilevazioni' section shows a table of vital signs. The 'Episodi' section shows 'Nessun episodio disponibile'. A red arrow labeled '2' points to the 'Configurazione' button in the 'Azioni Rapide' sidebar.



Allarme	Cognome	Nome	Cod.Fis.	Gruppo	Monitorato	Ultima Comunicazione	Note
PAZIENTE	TEST	TEST	PZNTST20A01H501U	ATS Sardegna	si - 36 giorni	10/03/2021 15:57:30	
PAZIENTE	TEST2	TEST2	PZNTST87A19H501L	ATS Sardegna	si - 31 giorni	04/03/2021 14:18:33	
OPPO	GIORGIO	GIORGIO	PPOGRG38T16B354M	ATS Sardegna	si - 2 giorni	22/03/2021 15:34:24	
FOIS	MARCO	MARCO	FSOMRC82R11B354O	ATS Sardegna	si - 21 giorni	18/03/2021 04:24:05	
ONALI	IGNAZIO	IGNAZIO	NLOGNZ49A23G207T	ATS Sardegna	si - 7 giorni	17/03/2021 17:26:03	
BLA	PIETRO	PIETRO	BUAPTR43T14G070O	ATS Sardegna	si - 8 giorni		

Data Ora	Parametro	Valore	Unità Misura
22/03/2021 15:34:21	TM	36.00	°C
22/03/2021 15:03:12	SPO2	96.00	%
22/03/2021 15:03:00	FCM	55.00	bpm

Configurazione > Gestione Parametri


- Selezionare *Gestione Parametri*
- Selezionare *Copia da Scheda* –

Il sistema propone la lista di schede da selezionare

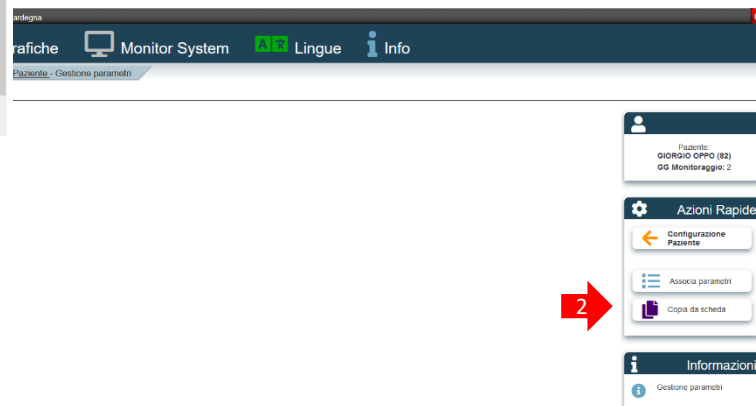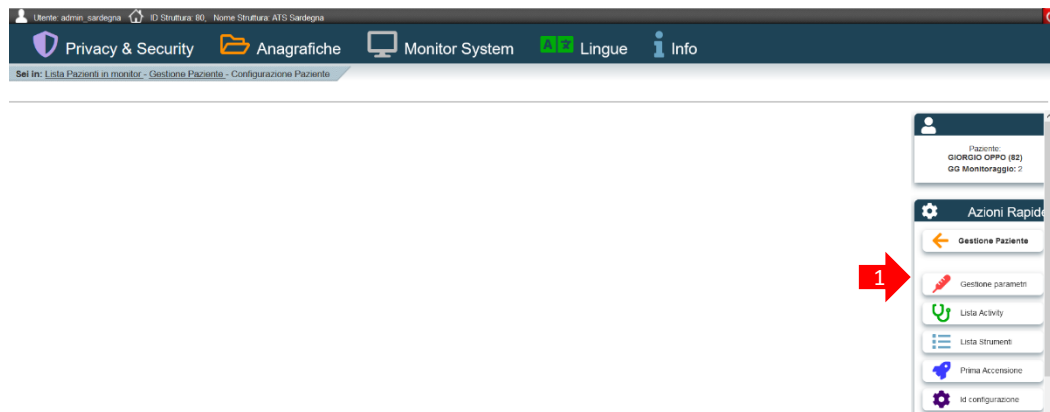

Configurazione > Gestione Parametri

- Selezionare la Scheda di interesse e selezionare *Copia in Paziente* – Il sistema propone un messaggio pop-up di avvertimento
- Selezionare il tasto OK

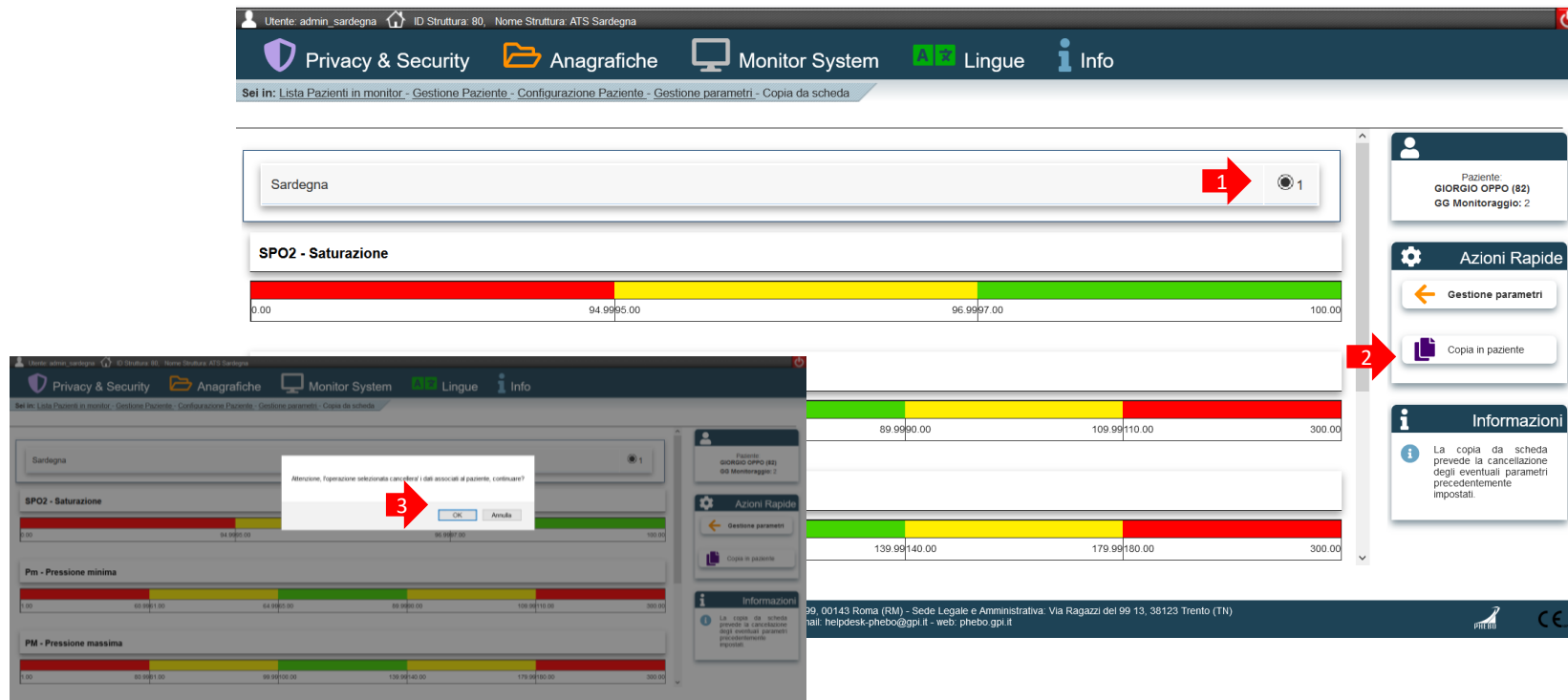

Utente: admin_sardegna ID Struttura: 80 Nome Struttura: ATS Sardegna

Privacy & Security Anagrafiche Monitor System Lingue Info

Sei in: Lista Pazienti in monitor - Gestione Paziente - Configurazione Paziente - Gestione parametri - Copia da scheda

Sardegna

SPO2 - Saturazione

0.00 94.99 95.00 96.99 97.00 100.00

89.99 90.00 109.99 110.00 300.00

139.99 140.00 179.99 180.00 300.00

Paziente: GIORGIO OPPO (82) GG Monitoraggio: 2

Azioni Rapide

Gestione parametri

Copia in paziente

Informazioni

La copia da scheda prevede la cancellazione degli eventuali parametri precedentemente impostati.


Attenzione, l'operazione selezionata cancellerà i dati associati al paziente, continuare?

OK Annulla

99, 00143 Roma (RM) - Sede Legale e Amministrativa: Via Ragazzi del 99 13, 38123 Trento (TN)
mail: helpdesk-prebo@gpi.it - web: prebo.gpi.it

Configurazione > Gestione Prima Accensione e Id Configurazione

- Selezionare il tasto *Prima Accensione*
- Selezionare il tasto *Id Configurazione* –
- Il sistema propone un messaggio pop-up con all'interno il **numero ID da comunicare al paziente**

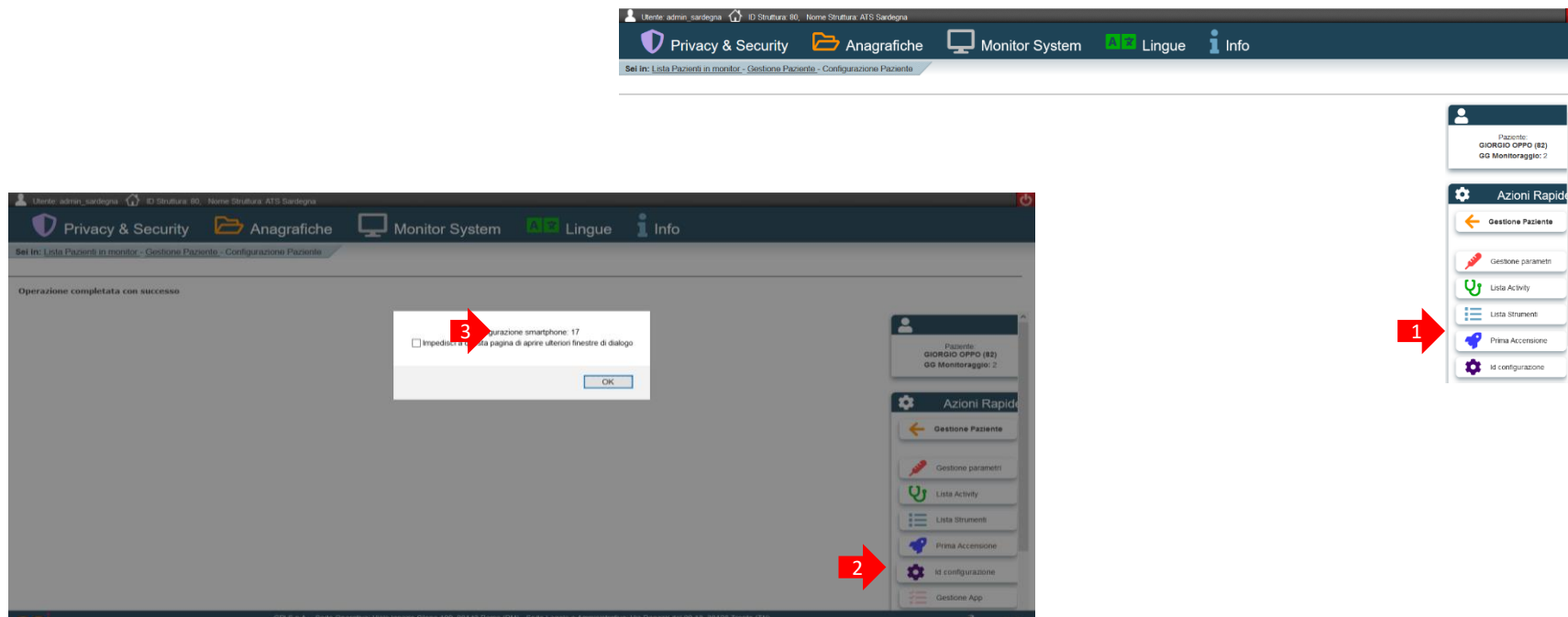

The screenshot displays the Gpi software interface. The top navigation bar includes 'Privacy & Security', 'Anagrafiche', 'Monitor System', 'Lingue', and 'Info'. The sidebar on the right, titled 'Azioni Rapide', lists several options: 'Gestione Paziente', 'Gestione parametri', 'Lista Activity', 'Lista Strumenti', 'Prima Accensione', and 'Id configurazione'. The main area shows a message 'Operazione completata con successo' and a pop-up dialog box with the text 'Configurazione smartphone: 17' and an 'OK' button. Red arrows indicate the sequence: 1 points to the 'Id configurazione' option in the sidebar, 2 points to the 'Id configurazione' option in the sidebar, and 3 points to the 'OK' button in the pop-up dialog.

PROCEDURA PRIMA ACCENSIONE eVoDroid

DOWNLOAD APP PHEBO – PRIMA ACCNESIONE

Una volta effettuato il download il sistema richiede 3 informazioni:

- STRUTTURA - 80
- PASSWORD - Sardegna
- ID CONFIGURAZIONE – xxxx

Id che viene generato dalla postazione web


Prima accensione

Struttura

Password

ID conf.

ASSOCIAZIONE DISPOSITIVO– PRIMA ACCNESIONE



Dati paziente


Nome	Cognome
IGNAZIO	ONALI

Strumenti assegnati

Associa

- Selezionare il Tasto «ASSOCIA»

- Selezionare il tasto «CONFERMA»

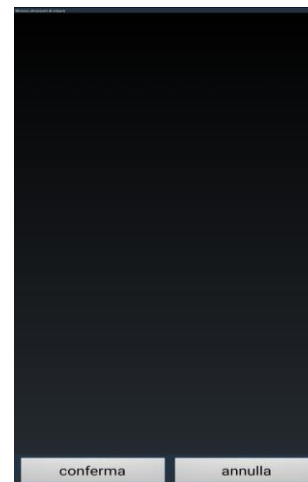


conferma annulla

PROCEDURA INVIO RILEVAZIONE eVoDroid


INVIO RILEVAZIONI



Selezionare l'icona della Cartella

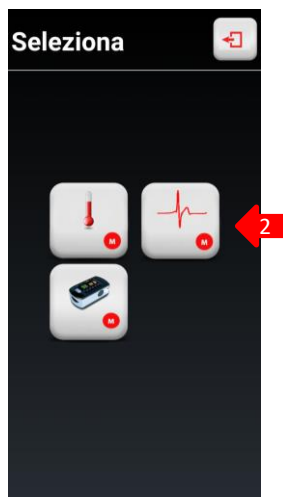

Selezionare il parametro che si intende trasmettere

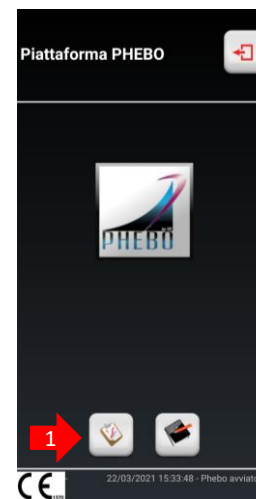

INVIO RILEVAZIONI



- Digitare il valore visualizzato nel dispositivo e selezionare il tasto OK
- Il sistema mostrerà un messaggio di richiesta di conferma invio rilevazione. Selezionare SI
- Il sistema elaborerà l'informazione e provvederà a trasmetterlo alla Centrale di Monitoraggio

PROCEDURA GESTIONE RILEVAZIONE eVoMed

ATTIVITA' DI GESTIONE ALLARMI



- Il sistema presenta la Lista dei Pazienti in ordine di Alert. Selezionare il Tasto Gestisci.
- Successivamente selezionare la Voce Lista Rilevazioni.

Utente: admin_sardegna ID Struttura: 80 Nome Struttura: ATS Sardegna

Privacy & Security Anagrafiche Monitor System Lingue Info

Sei in: Lista Pazienti in monitor

Filtro Ricerca Rapida

Cognome Nome Cod.Fis. Gruppo Monitorato Record Aggiorna

Allarme	Cognome	Nome	Cod.Fis.	Gruppo	Monitorato	Ultima Comunicazione	Note
	PAZIENTE	TEST	PZNTST20A01H501U	ATS Sardegna	si - 36 giorni	10/03/2021 15:57:30	
	PAZIENTE	TEST2	PZNTST87A19H501L	ATS Sardegna	si - 31 giorni	04/03/2021 14:18:33	
	OPPO	GIORGIO	PPOGRG38T16B354M	ATS Sardegna	si - 2 giorni	22/03/2021 15:34:24	
	FOIS	MARCO	FSOMRC92R11B354O	ATS Sardegna	si - 21 giorni	18/03/2021 04:24:05	
	ONALI	IGNAZIO	NLOGNZ49A23G207T	ATS Sardegna	si - 7 giorni	17/03/2021 17:25:03	
	BUA	PIETRO	BUAPTR43T14G070O	ATS Sardegna	si - 8 giorni		

1

Utente: admin_sardegna ID Struttura: 80 Nome Struttura: ATS Sardegna

Privacy & Security Anagrafiche Monitor System Lingue Info

Sei in: Lista Pazienti in monitor - Gestione Paziente

GIORGIO OPPO

Ultima Comunicazione : 22/03/2021 15:34

Giorni Monitoraggio : 2

Anagrafica

OPPO GIORGIO Sesso : M

Cod.Fis. : PPOGRG38T16B354M

Data di Nascita : 16/12/1935

Visualizza Modifica Terapie farmacologiche

Rilevazioni

Data Ora	Parametro	Valore	Unità Misura
22/03/2021 15:34:21	TM	36.00	°C
22/03/2021 15:03:12	SPO2	98.00	%
22/03/2021 15:03:00	FCM	50.00	bpm

2

Lista Rilevazioni Grafico

Episodi

Nessun episodio disponibile

Lista Episodi

ECG

Nessuna rilevazione disponibile

Activity

Nessuna attività rilevabile

Gallery

Nessun archivio multimediale rilevabile

Azioni Rapide

- Lista Pazienti in monitor
- Configurazione
- Compliance

Informazioni

Per nella lista dei pazienti monitorati, ed avere almeno una rilevazione di parametri, da visualizzare sul Monitor, premere su cui si possono applicare specifici filtri per ridurre la selezione.

ATTIVITA' DI GESTIONE ALLARMI



- Il sistema presenta la Lista delle Rilevazioni Trasmesse dal Paziente e attraverso la colonna Allarme è possibile visualizzare i parametri fuori soglia.
- Selezionare uno o più parametri di Interesse e successivamente selezionare Gestione Allarme

Utente: admin_sardegna ID Struttura: 80, Nome Struttura: ATS Sardegna

Privacy & Security Anagrafiche Monitor System Lingue Info

Sei in: Lista Pazienti in monitor - Gestione Paziente - Lista rilevazioni parametri

Filtro Ricerca Rapida

Da data: 22/02/2021 A data: 24/03/2021 Da ora: Record: 15 Allarme: - Aggiorna: ☒ FCM ☒ Pm ☒ PM ☒ SPO2 ☒ TM

Allarme	Data Ora	Descrizione	Parametro	Valore	Unità Misura	Seleziona	Visualizza	Episodio	Tracciato	Stampa
	22/03/2021 15:34:21	On demand	Temperatura Manuale	36,00	°C	<input checked="" type="checkbox"/>				
	22/03/2021 15:03:12	On demand	Saturazione	98,00	%	<input type="checkbox"/>				
	22/03/2021 15:03:00	On demand	Frequenza Cardiaca Manuale	55,00	bpm	<input type="checkbox"/>				
	22/03/2021 15:02:43	On demand	Temperatura Manuale	38,00	°C	<input type="checkbox"/>				

Azioni Rapide

Paziente: GIORGIO OPPO (82) GG Monitoraggio: 2

☒ Selezione tutti
☐ Deselezione tutti
 Gestione Allarmi
 Nuova Rilevazione
 Invalida Rilevazioni
 Ripristina Rilevazioni Invalidate

GPI S.p.A. - Sede Operativa: Viale Ignazio Silone 199, 00143 Roma (RM) - Sede Legale e Amministrativa: Via Ragazzi del 99 13, 38123 Trento (TN)
mail: helpdesk-phebo@gpi.it - web: phebo.gpi.it

ATTIVITA' DI GESTIONE ALLARMI



- Il sistema richiede di fornire una motivazione per la quale si sta spegnendo-gestendo l'allarme
- Una volta inserito il motivo, selezionare la voce Spegni Allarme
- L'allarme della rilevazione cambia stato.



Hai deciso di cambiare stato alle seguenti rilevazioni

Rilevazione				
Allarme	Data Ora	Descrizione	Parametro	Media
	22/03/2021 15:34	On demand	Temperatura Manuale	36,00

Paziente: GIORGIO OPPO (82)
GG Monitoraggio: 2

Azioni Rapide

← Lista rilevazioni parametri

Spegni Allarmi

Cambia Stato

Motivazione

Tutto OK

Utente: admin_sardegna ID Struttura: 80 Nome Struttura: ATS Sardegna

Privacy & Security Anagrafiche Monitor System Lingue Info

Sei in: Lista Pazienti in monitor - Gestione Paziente - Lista rilevazioni parametri

Filtro Ricerca Rapida

Da data: 22/02/2021 Da ora: - Descrizione: - Allarme: -

A data: 24/03/2021 A ora: Record: 15 Aggiorna

☒ FCM ☒ Pw ☒ PM ☒ SPO2 ☒ TSS

Cerca

Allarme	Data Ora	Descrizione	Parametro	Valore	Unità Misura	Seleziona	Visualizza	Episodio	Tracciato	Stampa
	22/03/2021 15:34:21	On demand	Temperatura Manuale	36,00	°C	<input type="checkbox"/>				
	22/03/2021 15:03:12	On demand	Saturazione	98,00	%	<input type="checkbox"/>				

3 →

Paziente: GIORGIO OPPO (82)
GG Monitoraggio: 2

Azioni Rapide

← Gestione Paziente

☒ Seleziona tutti

☐ Deseleziona tutti

Gestione Allarmi

+ Nuova Rilevazione



Abbiamo radici profonde, sviluppate in 30 anni di storia. Competenze, esperienze e passioni che guidano il nostro presente e ci spingono verso il futuro.



Contatti

Via Ragazzi del '99, 13
38123 Trento (Italia)

T +39 0461 381515
F +39 0461 381599

info@gpi.it
gpi@pec.gpi.it